

CARMEL®

DENTAL WAX CATALOG

CATALOGUE DE CIRE DENTAIRE

CATÁLOGO DE CERA DENTAL





Bite Block

A U-shaped piece of specially designed natural organic wax used in the fabrication of dentures. Used for setting teeth into when taking impressions.

Available in hard and soft.

- Easy to form and carve
- Polishes to high shine
- Teeth don't shift due to shrinkage
- Pre-formed
- Boils out cleanly
- Natural tissue color

Packaged 120 units per box

Bourrelet d'Occlusion

Morceau en forme de U de cire organique naturelle spécialement conçue pour la fabrication de prothèses dentaires. Utilisé pour prendre des dents lors de la prise d'empreintes.

Disponible en dur et doux.

- Facile à former et à sculpter
- Polis à haute brillance
- Les dents ne bougent pas à cause du rétrécissement
- Préformé
- Bouillonne proprement
- Couleur des tissus naturels

Conditionné par boîtes de 120 unités

Bloque de Oclusión

Una pieza en forma de U de cera orgánica natural especialmente diseñada utilizada en la fabricación de dentaduras postizas. Se utiliza para colocar los dientes cuando se toman impresiones.

Disponible en duro y blando.

- Fácil de formar y tallar
- Pulidos a alto brillo
- Los dientes no se mueven debido a la contracción
- Preformado
- Hierve limpiamente
- Color natural del tejido

120 unidades por caja

BB40019 Pink | Rose | Rosado



Bite Rim

Specially designed wax used in the fabrication of dentures.

Establishes vertical dimension and allows arranging of artificial denture teeth.

Wax Bite Rim Blocks are time-saving occlusal rims for the dentist or technician.

The pre-shaped curved blocks have a specially curved base to fit the model.

The blocks can be easily adapted to shape and carved with a wax knife.

Packaged 100 units per box

Cire en Bourrelet

Cire spécialement conçue pour la fabrication de prothèses dentaires.

Établit la dimension verticale et permet de disposer les dents d'une prothèse artificielle.

Les cales Wax Bite Rim sont des jantes occlusales rapides pour le dentiste ou le technicien.

Les blocs incurvés préformés ont une base spécialement incurvée pour s'adapter au modèle. Les blocs peuvent être facilement adaptés à la forme et sculptés avec un couteau de cire.

Conditionné par boîtes de 100 unités

Cera de Mordida en Herradura

Cera especialmente diseñada para la fabricación de dentaduras postizas.

Establece la dimensión vertical y permite la disposición de los dientes de la dentadura postiza.

Los bloques para mordeduras de cera son ceras oclusales que ahorran tiempo al dentista o al técnico. Los bloques preformados tienen una base especialmente curvada para adaptarse al modelo. Los bloques pueden adaptarse fácilmente a la forma y tallarse con un cuchillo de cera.

100 unidades por caja

BB40219 Pink | Rose | Rosado



Occlusal Rim

Specially designed wax for the fabrication of dentures.
Used to record occlusal relationships in the patient's teeth.

- Recessed base aids adoption to base plate.
- Can be reshaped at room temperature to fit the individual arch.

Packaged 100 Units Per Box

Cire D'Occlusion

Cera especialmente diseñada para la fabricación de prótesis dentales.

Se utiliza para registrar las relaciones oclusales en los dientes del paciente.

- La base empotrada ayuda a la adopción de la placa base.
- Se puede remodelar a temperatura ambiente para que se adapte a la arcada individual.

Conditionné par boîtes de 100 unités

Cera de Oclusión

Cera especialmente diseñada para la fabricación de prótesis dentales.

Se utiliza para registrar las relaciones oclusales en los dientes del paciente.

La base empotrada ayuda a la adopción de la placa base.

Se puede remodelar a temperatura ambiente para que se adapte a la arcada individual.

100 unidades por caja



Bite Stick

Specially designed wax sticks used in the fabrication of dentures. Sticks are made to fit the alveolar ridge for precise bite registration.

- Highest-quality ingredients ensure the utmost accuracy in bite registration.
- Sticks are easily shaped to conform to the dental arch.
- No waste. Shape to the model, cut off and use exactly what you need.

Available in soft, medium and hard versions.

2 lengths available: 225 mm (9") or 115 mm (4 1/2"), width and thickness 10 mm (3/8")

Packaged 4 lb (1.85 kg) per box

Cire en Bourrelet Droit

Bâtonnets de cire spécialement conçus pour la fabrication de prothèses dentaires. Les bâtons sont faits pour s'adapter à la crête alvéolaire pour un repérage précis des morsures.

- Les ingrédients de la plus haute qualité garantissent la plus grande précision dans l'enregistrement des bouchées.
- Les bâtons sont facilement façonnés pour s'adapter à l'arcade dentaire.
- Pas de déchets. Formez le modèle, découpez et utilisez exactement ce dont vous avez besoin.

Disponible en version molle, moyenne et dure.

Disponible en 2 longueurs: 225 mm (9") ou 115 mm (4 1/2"), largeur et épaisseur de 10 mm (3/8")

Conditionnée par boîtes de 1.85 kg (4 lb)

Barra de Mordida

Barras de cera especialmente diseñadas para la fabricación de prótesis dentales. Los bastones están hechos para adaptarse a la cresta alveolar para un registro preciso de la mordida.

- Los ingredientes de la más alta calidad aseguran la máxima precisión en el registro de la mordida.
- Los bastones se forman fácilmente para adaptarse al arco dental.
- Sin desperdicio. Dale forma al modelo, corta y usa exactamente lo que necesitas.

Disponible en versión suave, media y dura.

Disponible en dos tamaños: 225 mm (9") o 115 mm (4 1/2"), ancho y espesor de 10 mm (3/8")

100 unidades por caja

115 mm x 10 mm x 10 mm - 4,5" x 3/8" x 3/8"

BS40019 Pink | Rose | Rosado

BS40002 Yellow | Jaune | Amarillo

225 mm x 10 mm x 10 mm - 9" x 3/8" x 3/8"

BS40119 Pink | Rose | Rosado

BS40102 Yellow | Jaune | Amarillo

BB40319 Pink | Rose | Rosado

Orthodontic wax provides temporary relief from pain and irritation caused by braces and dental appliances rubbing against the soft tissue of the mouth. Application: Tear off small pieces of relief wax and apply directly to affected areas. Relief wax is typically applied to smooth out rough edges on: braces, dental appliances, dentures and damaged teeth. The wax will create a barrier that will prevent these rough edges from damaging the interior of the mouth. Carmel's orthodontic wax complies with FDA standards and has the CE Marking certification.

La cire orthodontique procure un soulagement temporaire de la douleur et de l'irritation causées par les appareils orthodontiques et les appareils dentaires qui frottent contre les tissus mous de la bouche.

Application: Déchirez de petits morceaux de cire en relief et appliquez directement sur les zones affectées. La cire de secours est généralement appliquée pour lisser les bords rugueux des appareils orthopédiques, des appareils dentaires, des prothèses dentaires et des dents endommagées. La cire créera une barrière qui empêchera ces bords rugueux d'endommager l'intérieur de la bouche.

La cire orthodontique de Carmel répond aux normes de la FDA et est également certifiée pour le marquage CE européen

La cera de ortodoncia proporciona un alivio temporal del dolor y la irritación causados por los aparatos de ortodoncia y los aparatos dentales que rozan el tejido blando de la boca.

Application: Rasgue pequeños pedazos la cera de alivio y aplique directamente en las áreas afectadas. La cera de alivio generalmente se aplica para suavizar los bordes ásperos en: aparatos ortopédicos, aparatos dentales, dentaduras postizas y dientes dañados. La cera creará una barrera que evitará que estos bordes ásperos dañen el interior de la boca.

La cera de ortodoncia de Carmel cumple con las normas de la FDA y también cuenta con la certificación para el mercado europeo CE



Orthodontic Relief Wax in Unscented Box

Unscented polypropylene or polystyrene box containing plain relief wax.

Packaged: 50 relief wax boxes/box or 40 boxes/case or 100 relief wax boxes/box, 20 boxes/case

Cire de Protection en Boîte Non Parfumée

Boîte en polypropylène ou polystyrène non parfumée contenant de la Cire de Protection.

Emballage: 50 boîtes/boîte en cire en relief ou 40 boîtes/boîte ou 100 boîtes/boîte en cire en relief, 20 boîtes/boîte

Cera de Alivio en Caja Sin Perfume

Caja de polipropileno o poliestireno sin perfume que contiene cera de alivio.

Envasado: 50 cajas plásticas de cera de alivio, 40 cajas/paquete, o 100 cajas plasticas de cera de alivio, 20 cajas/paquete

POLYPROPYLENE BOX
POLYPROPYLENE BOÎTE
POLIPROPILENO CAJA

RW40180 Clear | Translucide | Claro
RW40113 Silver | Argent | Plateado

POLYSTYRENE BOX
POLYSTYRENE BOÎTE
POLIESTIRENO CAJA

RW41104 Crystal clear & blue
Clair et bleu | Claro y azul



Orthodontic Relief Wax (Vitamin E/Mint/Aloe)

Polypropylene or polystyrene box containing relief wax with combinations of vitamin E/mint/aloe.

Packaged: 50 relief wax boxes/box 40 boxes/case or 100 relief wax boxes/box, 20 boxes/case

Cire de Protection (Vitamine E/Menthe/Aloë)

Boîte en polypropylène ou polystyrène contenant de la cire en relief avec des combinaisons de vitamine E/menthe/aloës.

Emballage: 50 boîtes/boîte en cire en relief ou 40 boîtes/boîte ou 100 boîtes/boîte en cire en relief, 20 boîtes/boîte

Cera de Alivio (Vitamina E/Menta/Aloe)

Caja de polipropileno o poliestireno que contiene cera de alivio con combinaciones de vitamina E/menta/aloe.

Envasado: 50 cajas plásticas de cera de alivio, 40 cajas/paquete, o 100 cajas plasticas de cera de alivio, 20 cajas/paquete

WHITE POLYPROPYLENE BOX
POLYPROPYLENE BOÎTE BLANC
POLIPROPILENO CAJA BLANCO

RW40510 Wax with Vitamin E
Cire avec Vitamine E
Cera con Vitamina E

CRYSTAL CLEAR & WHITE POLYSTYRENE BOX
CRISTAL CLAIR ET BLANC POLYSTYRENE BOÎTE
CLARO COMO EL CRISTAL Y BLANCO POLIESTIRENO CAJA

RW40510 Wax with Vitamin E
Cire avec Vitamine E
Cera con Vitamina E

GREEN POLYPROPYLENE BOX
POLYPROPYLENE BOÎTE VERT
POLIPROPILENO CAJA VERDE

RW40610 Mint
Cire à la menthe
Cera con menta
RW40710 Mint wax with vitamin E and aloe
Cire à la menthe, vitamine E et aloë
Cera con menta, vitamina E y aloë

CRYSTAL CLEAR & GREEN POLYSTYRENE BOX
POLYSTYRENE BOÎTE CRISTAL CLAIR ET VERT
POLIESTIRENO CAJA CLARO COMO EL CRISTAL Y VERDE

RW40610 Mint
Cire à la menthe
Cera con menta
RW40710 Mint wax with vitamin E and aloe
Cire à la menthe, vitamine E et aloë
Cera con menta, vitamina E y aloë



Orthodontic Relief Wax in Scented Coloured Box

A scented, coloured polypropylene box containing plain, colourless relief wax strips.

Packaged: 50 relief wax plastic boxes/box, 40 boxes/case
or 100 relief wax plastic boxes/box, 20 boxes/case

Cire de Soulagement Orthodontique en Boîte Colorée Parfumée

Boîte en polypropylène colorée parfumée contenant des bandes de cire en relief unies et incolores.

Conditionnement: 50 boîtes plastiques de cire de protection/boîte, 40 boîtes/caisse ou 100 boîtes plastiques de cire de protection/boîte, 20 boîtes/caisse

Cera de Alivio Ortodóntico en Caja Perfumada de Color

Una caja de polipropileno de color perfumado que contiene tiras de cera en relieve de color liso.

Embalaje: 50 cajas plásticas de cera de alivio, 40 cajas/paquete, o 100 cajas plásticas de cera de alivio, 20 cajas/paquete

	RW40210 Mint Menthe Menta
	RW40219 Bubble Gum Gomme à mâcher Chicle
	RW40201 Grape Raisin Uva
	RW40209 Cherry Cerise Cereza
	RW40216 Cinnamon Cannelle Canela
	RW40221 Cotton Candy Barbe à papa Algodón de azúcar
	RW40204 Blueberry Bleuet Zarzamora
	RW40212 Orange Orange Naranja
	RW40202 Pineapple Ananas Piña
	RW40203 Coconut Noix de coco Coco
	RW40205 Chocolate Chocolat Chocolate



Orthodontic Relief Wax Blister Pack

A blister pack containing a single Orthodontic wax box (a transparent box made of crystal clear polystyrene). Two distinct blister packs available for Orthodontic wax boxes containing plain or mint wax.

40 boxes/case

Cire Orthodontique dans Présentoir Blister

Un blister contenant une seule boîte de cire orthodontique (une boîte transparente en polystyrène transparent). Deux blisters distincts disponibles pour les boîtes de cire orthodontique contenant de la cire ordinaire ou de la menthe.

20 boîtes/caisse

Blister para Ceras de Ortodoncia

Un blister que contiene una sola caja de cera de ortodoncia (una caja transparente hecha de poliestireno cristalino). Dos paquetes de blister distintos disponibles para cajas de cera de ortodoncia que contienen cera simple o de menta.

20 cajas/paquete

RW404:0 Plain wax | Cire ordinaire | Cera simple



Coloured Orthodontic Relief Wax in Scented Clear box

A clear polypropylene box containing flavored colored wax.

Packaged: 50 Relief Wax plastic boxes/box, 40 boxes/case or 100 Relief Wax plastic boxes/box, 20 boxes/case

Cire de Soulagement Orthodontique Colorée dans une Boîte Transparente Parfumée

Une boîte en polypropylène contenant de la cire colorée avec saveur.

Conditionnement: 50 boîtes plastiques de cire de protection/boîte, 40 boîtes/caisse ou 100 boîtes plastiques de cire de protection/boîte, 20 boîtes/caisse

Cera de Alivio Ortodóntica Coloreada en Caja Transparente Perfumada

Una caja en polipropileno conteniendo cera de color con sabor.

Envase: 50 cajas plásticas de cera de alivio, 40 cajas/paquete, o 100 cajas plásticas de cera de alivio, 20 cajas/paquete

RW40212 Orange | Orange | Naranja
 RW40202 Pineapple | Ananas | Piña



Baseplate Waxes (Dimensions & formulas for countries throughout the American continent)

Multi-purpose dental wax used in the fabrication of dentures. Most often used to build trial plates for the arrangement of artificial denture teeth.

Baseplate wax is also used for a variety of other dental laboratory processes, including: inlay patterning, boxing of impression, casting, establishing the arch form, establishing the level of occlusal plane, recording the maxillary mandibular relation, corrective impression, and bite registration.

This is done for initial modeling and later fitting of trial dentures (try-ins) before the finished product is completed.

Designed for use in the dental lab, Carmel baseplate wax is rigid at mouth temperature but able to be molded at higher temperatures without cracking or tearing. It also resists flaking or chipping during carving. Finally, it leaves no residue upon boiling out.

All formulas are available in 1 lb (454 g) and 5 lb (2.270 kg) boxes

5 lb boxes packaged 10 boxes/case

Cire Plaque-Base (Dimensions et formules pour les pays du continent Américain)

Cire dentaire polyvalente utilisée dans la fabrication de prothèses dentaires. Le plus souvent utilisé pour construire des plaques d'essai pour la disposition des dents de prothèses artificielles. La cire de plaque de base est également utilisée pour une variété d'autres procédés de laboratoire dentaire, notamment: la structuration d'inlay, la mise en boîte d'empreinte, la coulée, l'établissement de la forme de la voûte, l'établissement du niveau du plan occlusal, l'enregistrement de la relation mandibulaire maxillaire, l'empreinte corrective et l'enregistrement de la morsure. Ceci est fait pour la modélisation initiale et l'ajustement ultérieur des prothèses d'essai (essais) avant la fin du produit fini. Conçue pour être utilisée dans les laboratoires dentaires, la cire de plaque de base Carmel est rigide à la température de la bouche mais peut être moulée à des températures plus élevées sans se fissurer ni se déchirer. Il résiste également à la desquamation ou à l'écaillage lors de la découpe. Enfin, il ne laisse aucun résidu lors de l'ébullition.

Toutes les formules sont disponibles en boîtes de 454 g (1 lb) et 2,27 kg (5 lb)

Boîtes de 5 lb, 10 boîtes par caisse

Ceras Para Placa Base (Dimensiones y fórmulas para países del continente Americano)

Cera dental multiusos utilizada en la fabricación de dentaduras. Se utiliza con más frecuencia para construir placas de prueba para la colocación de dientes de prótesis artificiales. La cera para placa base también se utiliza para una variedad de otros procesos de laboratorio dental, incluyendo: estampado de incrustaciones, encajonado de impresiones, vaciado, establecimiento de la forma del arco, establecimiento del nivel del plano oclusal, registro de la relación mandibular maxilar, impresión correctiva y registro de la mordida. Esto se hace para el modelado inicial y la posterior colocación de dentaduras de prueba (try-in) antes de que se complete el producto terminado. Diseñada para su uso en el laboratorio dental, la cera para placa base Carmel es rígida a la temperatura de la boca, pero puede moldearse a temperaturas más altas sin agrietarse ni romperse. También resiste la descamación o el astillado durante el tallado. Por último, no deja residuos al hervir.

Todas las fórmulas están disponibles en embalajes de 454 g (1 lb) y 2,27 kg (5 lb)

Cajas de 5 lb, 10 cajas por paquete

Sheet dimensions / Dimension des feuilles
Dimensiones de las láminas

7.62 cm - 3 inch
15.24 cm - 6 inch

5 LBS	1 LB	5 LBS	1 LB	5 LBS	1 LB	5 LBS	1 LB	5 LBS	1 LB
Universal		Expert		100 (Regular)		101 (Thin)		102 (Thick)	
BP40009	BP40109	BP44009	BP44109	BP44409		BP44509		BP44609	
BP40019	BP40119	BP44019	BP44119	BP44419		BP44519		BP44619	
Extra Tough		Premium Tenacious		TruForm		Flexi-Tough		Setup Wax	
BP42519	BP42619	BP47319	BP47419	BP42109	BP42209	BP43019	BP43119	BP40219	BP40319
				BP42119	BP42219				
Precision Pink		Bite Wax		Pink #2		Pink #3			
BP45619	BP45719	BP43402	BP43502	BP40619	BP40719	BP40819	BP40919		
Pretty Pink - Soft		Pretty Pink - Medium		Pretty Pink - Hard		Pretty Pink - X-Hard			
BP41219	BP41319	BP41419	BP41519	BP41619	BP41717	BP41819	BP41919		


Modelling Wax Sheets (European dimensions & formulas)

All formulas are available in 1.1 lb (500 g) and 5.51 lb (2.5 kg) boxes.
2.5 kg boxes packaged 10 boxes/case

Cire à Modeler en Plaque (dimensions et formules européennes)

Toutes les formules sont disponibles en boîtes de 500 g (1.1 lb) et 2.5 kg (5.51 lb).
Boîtes de 2.5 kg 10 boîtes par caisse

Cera de Modelar (dimensiones y fórmulas europeas)

Todas estas fórmulas están disponibles en cajas de 500 g (1.1 lb) y 2.5 kg (5.51 lb).
Cajas de de 2.5 kg 10 cajas por paquete

Sheet dimensions / Dimensions des feuilles / Dimensiones de las láminas



8.4 cm - 3 5/16 inch

17.14 cm - 6 3/4 inch

2.5 KG	500 G
Euro #2	
	ME40919
Euro #4	
ME40019	ME40119
Summit	
ME40219	ME40319
Setup Wax Regular	
ME45019	ME46019



Presentation Wax

Presentation wax is a type of carving wax used in the fabrication of crowns and bridges. It can also be used to craft temporaries. It is an opaque wax that smooths out imperfections and improves the look of dental prosthetics. Packaged in 2.469 oz (70 g) tins

Cire de Présentation

La cire de présentation est un type de cire à sculpter utilisée dans la fabrication de couronnes et de ponts. Il peut également être utilisé pour fabriquer des temporaires. C'est une cire opaque qui atténue les imperfections et améliore l'aspect des prothèses dentaires. Conditionnée en boîtes de 70 g (2.46 oz)

Cera de Presentación

La cera de presentación es un tipo de cera para esculpir utilizada en la fabricación de coronas y puentes. También se puede usar para hacer trabajadores temporales. Es una cera opaca que reduce las imperfecciones y mejora la apariencia de las prótesis dentales. Envasado en latas de 70 g (2.46 oz)

 PW40003 White | Blanc | Blanco



Chrome Cobalt Wax

Chrome cobalt (Cr-Co) wax is a specially formulated wax used to cast partial denture frameworks which are made from chrome-cobalt alloys. Packaged in 1 lb (454 g) of chunks per box

Cire de chrome cobalt

La cire au chrome-cobalt (Cr-Co) est une cire spécialement formulée pour couler les armatures de prothèses partielles en alliages de chrome et de cobalt. Blocs de 454 g (1 lb) par boîte

Cera de cromo cobalto

La cera de cromo-cobalto (Cr-Co) es una cera especialmente formulada para fundir estructuras de dentaduras parciales que están hechas de aleaciones de cromo-cobalto. Envasado en bloques de 454 g (1 lb)

 IW42014 Dark Blue | Bleu Foncé | Azul Oscuro

Sculpturing Wax

Sculpturing dental wax is a specialized opaque wax used in the fabrication of crowns and bridges. A high viscosity wax that sets to medium hardness with excellent carvability, it is ideal for carving out models of inlays, onlays, full crowns and ceramic frameworks. Packaged in 2.469 oz (70 g) tins

Cire à Sculpter

La cire dentaire sculpturante est une cire opaque spécialisée utilisée dans la fabrication de couronnes et de bridges. Cire à haute viscosité, durcissant à la dureté moyenne et offrant une excellente sculptabilité, elle est idéale pour tailler des modèles d'inlays, d'onlays, de couronnes complètes et de cadres en céramique. Boîte de 70 g (2.46 oz)

Cera Para Esculpir

La cera dental para esculpir es una cera opaca especializada utilizada en la fabricación de coronas y puentes. Es una cera de alta viscosidad que se fija en dureza media con una excelente capacidad de tallado y es ideal para tallar modelos de incrustaciones inlay, onlay, coronas completas y estructuras cerámicas. Envasado en latas de 70 g (2.46 oz)



 SC40001 Purple | Violet | Morado
 SC40004 Blue | Bleu | Azul
 SC40005 Brown | Brun | Café
 SC40009 Red | Rouge | Rojo
 SC40010 Green | Vert | Verde
 SC40018 Gray | Gris | Gris



Modelling Wax

Carmel modelling wax is a specially formulated medium-hard universal wax used in the creation of crowns and bridges and in model casting framework techniques.

Offers a number of benefits, including:

- High level of precision and accuracy
- Low shrinkage
- Great modeling and carving characteristics

Packaged in 2.46 oz (70 g) tins

Cire à Modeler

La cire à modeler Carmel est une cire universelle mi-dure spécialement formulée et utilisée dans la création de couronnes et de bridges mais aussi dans des techniques de moulage de modèles. Cette dernière offre un certain nombre d'avantages, notamment:

- Haut niveau de précision et d'exactitude
- Faible rétrécissement
- Excellentes caractéristiques de modélisation et de sculpture

Boîte de 70 g (2.46 oz)

Cera Para Modelar

La cera para modelar Carmel es una cera universal de dureza media especialmente formulada que se utiliza en la creación de coronas y puentes y en técnicas de estructuras de moldes. Ofrece una serie de beneficios, que incluyen:

- Alto nivel de precisión y exactitud
- Baja contracción
- Excelentes características de modelado y tallado

Envasado en latas de 70 g (2.46 oz)

	IW42104 Blue Bleu Azul
	IW42109 Red Rouge Rojo
	IW42110 Green Vert Verde



Margin Wax

Margin wax is a specialized wax used in dental labs for the creation of crowns and bridges. It is ideal for copings and frameworks. Formulated to resist deformation and breakage and be easy to trim.

Packaged in 2.469 oz (70 g) tins

Cire à Marger

La cire à marges est une cire spécialisée utilisée dans les laboratoires dentaires pour la création de couronnes et de ponts. C'est idéal pour les copings et les cadres. Formulé pour résister à la déformation et à la rupture et être facile à couper.

Boîte de 70 g (2.46 oz)

Cera Para Márgenes

Cera para márgenes es una cera especializada utilizada en laboratorios dentales para la creación de coronas y puentes. Es ideal para molduras y estructuras. Formulado para resistir deformaciones y roturas y ser fácil de recortar.

Envasado en latas de 70 g (2.46 oz)

	MW40002 Yellow Jaune Amarillo
	MW40003 White Blanc Blanco
	MW40009 Red Rouge Rojo
	MW40014 Dark Blue Bleu Foncé Azul Oscuro



Inlay Wax

Inlay wax is specially formulated for crafting patterns of dental crowns and bridges. It is designed to be mouldable and carvable. It can be used with various techniques such as build-up and direct pattern forming. Once melted, Inlay Wax is a superior wax for carving without chipping or flaking. It also has excellent flow and carving properties.

Tins: 2.46 oz (70 g) per tin

Chunks: 1 lb (454 g) per box, packaged 24 boxes/case

Sticks: 12, 24, or 120 per box

Cire à Inlay

La cire à incrustation est spécialement formulée pour la fabrication de motifs de couronnes et de bridges dentaires. Il est conçu pour être moulable et sculptable. Il peut être utilisé avec diverses techniques telles que l'accumulation et la formation directe de motifs. Une fois fondue, Inlay Wax est une cire supérieure pour sculpter sans ébrécher ni s'écailler. Il a également d'excellentes propriétés d'écoulement et de sculpture.

Boîte: 70 g (2.46 oz) par boîte

Blocs: 454 g (1 lb) par boîte, 24 boîtes par caisse

Bâtons: 12, 24 ou 120 par boîtes

Cera Para Incrustar

La cera para incrustaciones está especialmente formulada para crear patrones de coronas y puentes dentales. Está diseñado para ser moldeable y tallable. Se puede utilizar con varias técnicas como la acumulación y la formación directa de patrones. Una vez fundida, la cera para incrustaciones es una cera superior para tallar sin astillar ni descascarar. También tiene excelentes propiedades de fluidez y tallado.

Latas: 70 g (2.469 oz) por lata

Bloques: 454 g (1 lb) por caja, 24 cajas/empaque

Bastones: 12, 24 y 120 por caja

TINS | BOÎTE | LATAS

IW41004	Blue Bleu Azul
IW41010	Green Vert Verde
IW41017	Ivory Ivoire Marfil

CHUNKS | BLOCS | BLOQUES

IW40004	Blue Bleu Azul
IW40010	Green Vert Verde
IW40017	Ivory Ivoire Marfil

STICKS | BÂTONS | BASTONES

12x	24x	120x
IW40104	IW40204	IW40304 Blue Bleu Azul
IW40110	IW40210	IW40310 Green Vert Verde
IW40117	IW40217	IW40317 Ivory Ivoire Marfil



Sticky Wax

Sticky Wax is a specially designed dental wax used for pattern repairs, touch ups and welding waxes together. It's also used to secure sprues to their base. It is a hard, fast-setting wax. It becomes very hard when cooled down and immediately indicates any undesired slipping of the parts to be connected.

• Repairs wax patterns and welds waxes together.

• Set-up for soldering matrix and attaching sprue gates.

• Melting temperature: 58°C (136°F)

Chunks: 1 lb (454 g) per box, packaged 24 boxes/case

Sticks: 12, 24, or 120 per box

Cire Collante

La Cire Collante est une cire dentaire spécialement conçue pour les réparations de motifs, les retouches et le collage de cires. Il est également utilisé pour sécuriser les carottes à leur base. C'est une cire dure à prise rapide. Il devient très dur lorsqu'il est refroidi et indique immédiatement tout glissement non souhaité des pièces à connecter.

• Répare les motifs de cire et soude les cires ensemble.

• Configuration pour la matrice de soudure et la fixation de canaux de carottes.

• Température de fusion: 58°C (136°F)

Trozos: 454 g (1 lb) por caja, 24 cajas/empaque.

Bâtons: 12, 24 ou 120 par boîtes

Cera Pegajosa

Esta una cera dental especialmente diseñada para la reparación de patrones, retoques y ceras para soldar juntas. Es una cera dura y de fraguado rápido. Se vuelve muy duro cuando se enfría e indica inmediatamente cualquier deslizamiento no deseado de las piezas que se van a conectar.

• Repara patrones de cera y suelda las ceras juntas.

• Montaje para soldar la matriz y fijar las compuertas de sprues.

• Temperatura de fusión: 58°C (136°F)

Blocs: 454 g (1 lb) par boîte, 24 boîtes par caisse

Bastones: 12, 24 y 120 por caja

CHUNKS HONEY | MIEL | MIEL

SW40007

STICKS HONEY | MIEL | MIEL

12x	24x	120x
SW40207	SW40307	SW40407



Wire Wax

Wire wax is used to craft bars and sprues for crown and bridge fabrication. Easy to mold and available in different hardness.

Wax wire wound on spools containing 0.5 lb (227 g) or 8.8 oz (250 g)

Available in blue, natural, green, turquoise and white, in different hardnesses.

Packaged 1 spool/box, 50 boxes/case. Different sizes can be combined to fill a case

Fil de Cire en Rouleau

La cire de fil est utilisée pour fabriquer des barres et des carottes pour la fabrication de couronnes et de ponts.

Facile à mouler et disponible en différentes duretés.

Bobine de 227 g (0.5 lb) ou 250 g (8.8 oz).

Disponible en bleu, vert, turquoise et blanc, en différentes duretés.

1 bobine/boîte, 50 boîtes/caisse. Différentes grandeurs peuvent être combinées pour remplir une caisse.

Hilo de Cera

El hilo de cera se utiliza para fabricar barras y sprues para la fabricación de coronas y puentes. Fácil de moldear y disponible en diferentes durezas.

Hilo de cera embobinado en carretes de 227 g (0.5 lb) o 250 g (8.8 oz).

Disponible en azul, verde, turquesa y blanco, en diferentes durezas.

1 carrete/caja, 50 cajas/paquete. Diferentes medidas pueden ser combinadas para llenar un paquete.

0.5 LB SPOOLS BOBINES CARRETES				250 G SPOOLS BOBINES CARRETES		
Blue Bleu Azul				Blue Bleu Azul		
Gauge Calibre Calibre	Round Rond Redondo	1/2 Round Demi lune Media luna	1/2 Pear 1/2 poire 1/2 pera	Metric Métrique Métrico	Round Rond Redondo	1/2 Round Demi lune Media luna
4 (0.204", 5.2mm)	SP42004	SP41004	SP41704	0.5 mm	SP43004	
6 (0.162", 4.1mm)	SP40004	SP41104		1.0 mm	SP43104	
8 (0.128", 3.3mm)	SP40104	SP41204		1.5 mm	SP43204	SP44204
10 (0.102", 2.6mm)	SP40204	SP41304		2.0 mm	SP43304	SP44304
12 (0.081", 2.1mm)	SP40304	SP41404		2.5 mm	SP43404	SP44404
14 (0.064", 1.6mm)	SP40404	SP41504		3.0 mm	SP43504	SP44504
16 (0.051", 1.3mm)	SP40504	SP41604		3.5 mm	SP43604	SP44604
18 (0.040", 1.0mm)	SP40604			4.0 mm	SP43704	
20 (0.032", 0.8mm)	SP40704			4.5 mm	SP43804	
22 (0.025", 0.6mm)	SP40804			5.0 mm	SP43904	
24 (0.020", 0.5mm)	SP40904			5.5 mm	SP44004	
				6.0 mm	SP44104	



Dipping Wax

A specially formulated wax with a micro-crystalline structure used in the fabrication of crown and bridge patterns. Ideal as a base coat for inlay and onlay patterns or dipped wax copings. Produces positively adapted margins.

Packaged in 9 oz (255 g) and 18 oz (510 g) bottles.

Cire d'Immersion

Cire spécialement formulée à structure microcristalline utilisée dans la fabrication de motifs de couronnes et de ponts. Idéal comme couche de base pour les motifs d'inlay et onlay ou les margelles en cire trempées. Produit des marges positivement adaptées.

Disponible en bouteille de 255 g (9 oz) et 510 g (18 oz)

Cera de Inmersión

Una cera especialmente formulada con una estructura micro cristalina utilizada en la fabricación de patrones de coronas y puentes. Ideal como capa de base para diseños de incrustaciones y sobreimpresiones o cofias de cera por inmersión. Produce márgenes positivamente adaptados.

Envasada en botellas de 255 g (9 oz) y 510 g (18 oz)

9 OZ	18 OZ
DW40002	DW40102 Yellow Jaune Amarillo
DW40004	DW40104 Blue Bleu Azul
DW40009	DW40109 Red Rouge Rojo
DW40010	DW40110 Green Vert Verde



Utility Wax

Specially formulated wax used in the denture impression process. Applied to the impression tray to protect and preserve the periphery edge. Improves the accuracy of transfers from the impression to the model. Soft, easily molded at room temperature. Can be used without pre-heating. Two profiles available:
 Round: 3/16" (4.76 mm) diameter x 11" (27.94 cm) long. 64 rods per box.
 Square: 3/16" (4.76 mm) x 11" (27.94 cm) long.
 44 strips per box, packaged 50 boxes/case.

Bande de Cire Utilitaire

Cire spécialement formulée utilisée dans le processus d'empreinte de la prothèse. Appliquée sur le porte-empreinte pour protéger et préserver le bord périphérique. Améliore la précision des transferts de l'empreinte au modèle. Doux, facilement moulé à la température ambiante. Peut être utilisé sans préchauffage.

Disponibles sous deux formes:

Ronde: 4.76 mm (3/16") diamètre x 27.94 cm (11") longueur. 64 tiges par boîtes.

Carrée: 4.76 mm (3/16") x 27.94 cm (11") longueur.

44 tiges par boîtes, Conditionnement de 50 boîtes/caisse

Cera de Utilidad

Cera especialmente formulada que se utiliza en el proceso de impresión de la dentadura postiza. Se aplica a la cubeta de impresión para proteger y preservar el borde periférico. Mejora la precisión de las transferencias de la impresión al modelo. Suave, fácil de moldear a temperatura ambiente. Se puede utilizar sin precalentamiento.

Disponible en dos formas:

Redondo: 4.76 mm (3/16") diámetro x 27.94 cm (11") largo. 64 barras por caja.

Cuadrado: 4.76 mm (3/16") x 27.94 cm (11") largo. 44 barras por caja.

44 tiras/caja, embaladas 50 cajas/empaque

ROUND RONDE REDONDA	SQUARE CARRÉE CUADRADA
 UW40003	UW40103 White Blanc Blanco
 UW40009	UW40109 Red Rouge Rojo



Boxing Wax

Strips of specialized wax used in boxing impressions. When creating a full denture impression, boxing wax is applied in conjunction with periphery and beading wax to improve adhesion and accuracy during the impression process.

- Sticky, provides good adhesion without the application of heat.
- Withstands extreme heat given off by dental stone during setting.
- Available in regular thickness and extra thin versions.

Dimensions: 11" (27.94 cm) long x 1.5" (3.81 cm) wide

Regular: 0.062" (1.6 mm) thick

Extra thin: 0.040" (1.0 mm) thick

Packaged 1 lb (454 g) & 5 lb (2.270 kg) per box

1 lb boxes packaged 50 boxes/case

5 lb boxes packaged 10 boxes/case

Cire de Coffrage

Bandes de cire spécialisée utilisées pour créer une bordure autour d'une empreinte de prothèse. Appliquée avec de la cire périphérique et des cires pour améliorer l'adhérence et la précision lors du processus d'impression. Doux, facilement moulé à la température ambiante.

- Collant, offre une bonne adhésion sans application de chaleur.
- Résiste à la chaleur extrême dégagée par la pierre dentaire lors de la pose.
- Disponible en versions d'épaisseur régulière et extra-fine.

Dimensions: 27.94 cm (11") longueur x 3,81 cm (1,5") largeur

Régulière: 1.6 mm (0,06") d'épaisseur

Extra fine : 1,0 mm (.040") d'épaisseur

Conditionnée en boîtes de 454 g (1 lb) et 2.27 kg (5 lb).

50 boîtes de 1 lb/caisse

10 boîtes de 5 lb/caisse

Cera Para Encajonar

Tiras de cera especializada utilizadas en impresiones de encaje. Cuando se crea una impresión de dentadura completa, la cera de encaje se aplica junto con la cera periférica y la cera de reborde para mejorar la adhesión y la precisión durante el proceso de impresión.

- Pegajoso, proporciona una buena adhesión sin la aplicación de calor.
- Resiste el calor extremo que desprende la piedra dental durante el fraguado.
- Disponible en versiones de espesor normal y extra fino.

Dimensions: 27.94 cm (11") de largo x 3,81 cm (1,5") de ancho

Regular: 1.6 mm (0,06") de grosor

Extra delgado : 1.0 mm (.040") de grosor

Envase de 454 g (1 lb) y 2.27 kg (5 lb) por caja

50 cajas de 1 lb/paquete

10 cajas de 5 lb/paquete

REGULAR RÉGULIER REGULAR	EXTRA THIN EXTRA MINCE EXTRA FINO
 1 lbs BW40309	BW40409 Red Rouge Rojo
 5 lbs BW40509	BW40609 Red Rouge Rojo



Periphery Wax

Rods of wax designed to improve the denture impression process. Periphery wax expands the peripheral edge and post dam areas of the impression tray. It protects the soft tissue during impression and helps achieve accurate results.

- Soft, easily molded at room temperature.
- Can be quickly placed on castings due to its flexibility and adherence.
- Easily separated from the model, less tension on standing dentition.
- Quick model preparation, no colour-marking of the jaw margin and no cutting down of gypsum.

6" (15.24 cm) x 1/4" (6.4 mm) diameter

Packaged 60 rods per box

Cire Pour les Périphéries

Tiges de cire conçues pour améliorer le processus d'empreinte de la prothèse. La cire pour périphérie élargit le bord périphérique et les zones postérieures à la digue du porte-empreinte. Il protège les tissus mous pendant l'impression et aide à obtenir des résultats précis.

- Doux, facilement moulé à la température ambiante.
- Peut être rapidement placé sur des pièces en raison de sa souplesse et de son adhérence.
- Facilement séparable du modèle, moins de tension sur la dentition debout.
- Préparation rapide du modèle, pas de marquage de couleur du bord de la mâchoire ni de découpe du gypse.

15.24 cm (6") x 6.4 mm (1/4") diamètre.

Conditionnée par boîtes de 60 tiges

Cera Periférica

Varillas de cera diseñadas para mejorar el proceso de impresión de la dentadura postiza. La cera periférica expande el borde periférico y las áreas de la cubeta de impresión. Protege el tejido blando durante la impresión y ayuda a obtener resultados precisos.

- Suave, fácil de moldear a temperatura ambiente.
- Se puede colocar rápidamente en piezas fundidas debido a su flexibilidad y adherencia.
- Fácilmente separable del modelo, menos tensión en la dentición de pie.
- Rápida preparación del modelo, sin marcas de color en el margen de la mandíbula y sin cortar el yeso.

15.24 cm (6") x 6.4 mm (1/4") diámetro.

Envase de 60 tiras por caja

PW40004 Blue | Bleu | Azul



Sprue Wax

Wax specially designed for creating sprues used in the casting of dental prostheses. Ideal for use with the Valplast process. 6" (15.24 cm) long round rod. Packaged 1 lb (454 g) per box, 20 boxes/case

Diameters:

5 gauge (0.182", 4.62mm), 6 gauge (0.162, 4.1mm), 8 gauge (0.128", 3.3mm), 10 gauge (0.102", 2.6mm) and 1/4" inch (6.4mm)

Cire à modeler

Cire spécialement conçue pour créer des carottes utilisées dans la coulée de prothèses dentaires. Idéal pour une utilisation avec le processus Valplast. Facile à travailler, ne devient pas fragile.

Tige ronde 15.24 cm (6") de longueur. Conditionnée en boîtes de 1 lb (454 g).

Diamètre:

5 jauge (0.182", 4.62mm), 6 jauge (0.162, 4.1mm), 8 jauge (0.128", 3.3mm), 10 jauge (0.102", 2.6mm) et 1/4" pouces (6.4mm)

Cera de modelaje

Cera especialmente diseñada para el moldeo de prótesis dentales. Ideal para su uso con el proceso Valplast.

Barra redonda de 15.24 cm (6") de largo. Envase de 1 lb (454 g) por caja

Diámetro:

5 calibre (0.182", 4.62mm), 6 calibre (0.162, 4.1mm), 8 calibre (0.128", 3.3mm), 10 calibre (0.102", 2.6mm) y 1/4" pulgadas (6.4mm)

GAUGE JAUGE CALIBRE				INCH POUCE PULGADA
5	6	8	10	1/4
SW40009	SW40109	SW40209	SW40309	SW40409 Red Rouge Rojo

Lingual Bar

Specially designed dental wax in pre-formed lingual connector bars. Used for mandibular lingual plate waxing and maxillary/mandibular buccal flange waxing. Ideal for the fabrication of dental prostheses using the Valplast process. Packaged 1 lb (454g) per box. 20 boxes/case

Barre Linguale

Cire dentaire spécialement conçue dans des barres de connexion lingual préformées. Utilisé pour l'épilation des plaques linguales mandibulaires et l'épilation des brides vestibulaires maxillaires / mandibulaires. Idéal pour la fabrication de prothèses dentaires utilisant le procédé Valplast.

Conditionnée en boîtes de 454 g (1 lb). 20 boîtes / caisse

Barra lingual

Cera dental especialmente diseñada en barras de conexión linguales preformadas. Se utiliza para la modelación de placas linguales /mandibulares y para la modelación de bridas bucales maxilares/mandibulares. Ideal para la fabricación de prótesis dentales mediante el proceso Valplast.

Envase de 454g (1 lb) por caja. 20 cajas / cartón



LW40019 Pink | Rose | Rosado

**Palate Wax**

Pre-formed wax plates specially designed for use in dental prostheses fabrication. Helps achieve proper thickness and accurate anatomical details for precise finishing. Ideal for use with the Valplast process.
Packaged 80 units/box

Cire à Palais

Plaques de cire préformées spécialement conçues pour la fabrication de prothèses dentaires. Permet d'obtenir l'épaisseur appropriée et des détails anatomiques précis pour une finition précise. Idéal pour une utilisation avec le processus Valplast.
Conditionnée en boîtes de 80 unités

Cera Para Paladar

Placas de cera preformadas especialmente diseñadas para su uso en la fabricación de prótesis dentales. Ayuda a lograr un grosor adecuado y detalles anatómicos precisos para un acabado preciso. Ideal para su uso con el proceso Valplast.
Envase de 80 unidades por caja

 BB40419 Pink | Rose | Rosado**Beading Wax**

Specially designed strips of wax used to bead around the edge of functional impression. Applied in conjunction with periphery and boxing wax prior to casting. Ensures the final denture will have a good peripheral seal. Soft, easily molded at room temperature.
Packaged 5 lb (2.27 kg) per box, 10 boxes/case

Baguettes de Cire

Des bandes de cire spécialement conçues pour perler le long du bord d'une empreinte de prothèse. Appliqué en conjonction avec la périphérie et la cire de boxe avant la coulée. Doux, facilement moulé à la température ambiante.
Conditionnées en boîtes de 2.27 kg (5 lb), 10 boîtes/caisse.

Bastones de Cera

Bastones de cera especialmente usados para formar alrededor del borde de la impresión funcional. Se aplica junto con cera periférica y de encaje antes del moldeo. Asegura que la dentadura postiza final tenga un buen sellado periférico. Suave, fácil de moldear a temperatura ambiente.
Envase de 2.27 kg (5 lb) por caja, 10 cajas/paquete

 BW41009 Red | Rouge | Rojo



Non-Laminated Bite Wafers

Bite Wafers are U-shaped, soft bite registration wax slips; designed for fast, precise impressions.
Single Layered Bite Wafers No foil: single layer; adapts to dental arch; provides quick, precise bite-checks.
Packaged 50 units per box

Laminated Bite Wafers

Double-layered laminated wax bite wafers. Aluminum foil laminated between the two layers stabilizes the wafer to lessen distortion and prevent bite through.
Packaged 24, 36 or 84 units/box, 16 boxes/case

Gauffrettes d'Occlusion non Laminées

Aucune feuille: une seule couche; s'adapte à l'arcade dentaire; fournit des morsures rapides et précises.
Emballé 50 unités par boîte

Gauffrettes d'Occlusion Laminées

2 feuilles de cire stabilisées par une feuille d'aluminium.
Conditionnée par boîte de 24, 36 or 84 unités, 16 boîtes/caisse

Ceras de Articulación no Laminadas

Sin lámina: una sola capa; se adapta al arco dental; permite un control rápido y preciso de la mordida.
Embalaje de 50 unidades por caja

Ceras de Articulación Laminadas

Wafers de mordida de cera laminada de doble capa. La lámina de aluminio laminada entre las dos capas estabiliza la cera para disminuir la distorsión y evitar errores de registro.
Embalaje de 24, 36 u 84 unidades/caja, 16 cajas/caja



Orthopedic Wax Bites

Small bite registration waxes. Specially designed to achieve appropriate teeth registration for construction of orthopaedic appliances. Disposable, non-sterile.
Packaged 28 units per box, 21 boxes/case

Cire-Ortho à Mordre

Petites cires d'enregistrement de morsures. Spécialement conçu pour obtenir un enregistrement approprié des dents pour la construction d'appareils orthopédiques.
Jetable, non stérile.
Conditionnée en boîtes de 28 unités, 21 boîtes/caisse

Ortho-Cera de Mordida

Pequeñas ceras de registro de mordida. Especialmente diseñado para lograr el registro adecuado de los dientes para la construcción de aparatos ortopédicos.
Desechable, no estéril.
Embalaje de 28 unidades por caja, 21 cajas/caja

OW40019 Pink | Rose | Rosado



Bite Registration Wax

Specialized wax used to check occlusal relationships in patient bites.
Ideal for maintaining accurate occlusion records. Resists distortion and deformation.
2 forms available: Sheets: Can be cut and molded into desired shapes as needed.
Dimensions: 6" (15.24 cm) x 3" (7.62 cm). Packaged 1 lb (454 g)/box
Wafers: U-shaped wax wafers. Packaged 25 per box

Cire pour Enregistrement

Cire spécialisée utilisée pour vérifier les relations occlusales dans les morsures des patients. Idéal pour maintenir des enregistrements d'occlusion précis.
Résiste à la déformation et à la déformation.
Conditionnée en 2 formes disponible: Feuilles: peuvent être coupées et moulées dans les formes souhaitées selon les besoins.
Dimensions: 15.24 cm (6") x 7.62 cm (3"). 454 g (1 lb) par boîtes
Gauffrettes: Gauffrettes de cire en forme de U. Emballé 25 par boîte
Gauffrettes: 25 par boîtes

Cera para Registro de Mordida

Cera especializada utilizada para comprobar las relaciones oclusales en las mordeduras de los pacientes. Ideal para mantener registros precisos de oclusiones.
Resiste la distorsión y la deformación. Viene en dos formas: Hojas: se pueden cortar y moldear en las formas deseadas según sea necesario. Dimensiones: 15.24 cm (6") x 7.62 cm (3"). 454 g (1 lb) Obleas: Obleas de cera en forma de U.
Embalaje 25 por caja

NON-LAMINATED BITE WAFER | GAUFFRETTES D'OCCLUSION NON LAMINÉES CERA DE ARTICULACIÓN NO LAMINADA

Soft 50/box	Hard 50/box
 BW40002 Yellow Jaune Amarillo	 BW40010 Green Vert Verde

LAMINATED BITE WAFER | GAUFFRETTES D'OCCLUSION LAMINÉES CERA DE ARTICULACIÓN LAMINADA

24/box	36/box	84/box
 BW40004 Blue Bleu Azul	 BW40005 Copper Cuivre Cobre	 BW40105 Copper Cuivre Cobre
	 BW40003 White Blanc Blanco	 BW40103 White Blanc Blanco

SHEETS
FEUILLES
HOJAS

WAFERS
GAUFFRETTES
OBLEAS

BR40004

BR40104 Blue | Bleu | Azul

CARMEL'S OTHER WAX PRODUCT CATALOG

AUTRES PRODUITS DE CIRE CARMEL
OTROS PRODUCTOS DE CERAS CARMEL

www.carmelindustries.com/all-carmel-waxes

All Carmel Waxes

All Waxes

Dental Waxes

Cosmetic / Pharma / Natural

Jewelry Wax

Investment Casting Waxes

Petroleum, Polyethylene & Synthetic

Food Industry

Adhesives & Hot Melt



INVESTMENT CASTING WAXES



RELIEF WAX WITH VITAMIN E



MINT RELIEF WAX WITH VITAMIN E AND ALOE




FOOT IMPRESSION WAX



PARAFFIN WAX BATHS REFILL




SYNTHETIC FISCHER-TROPSCH (FT) WAX

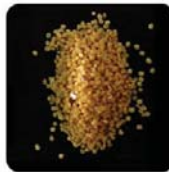

POLYETHYLENE WAX



SLACK WAXES

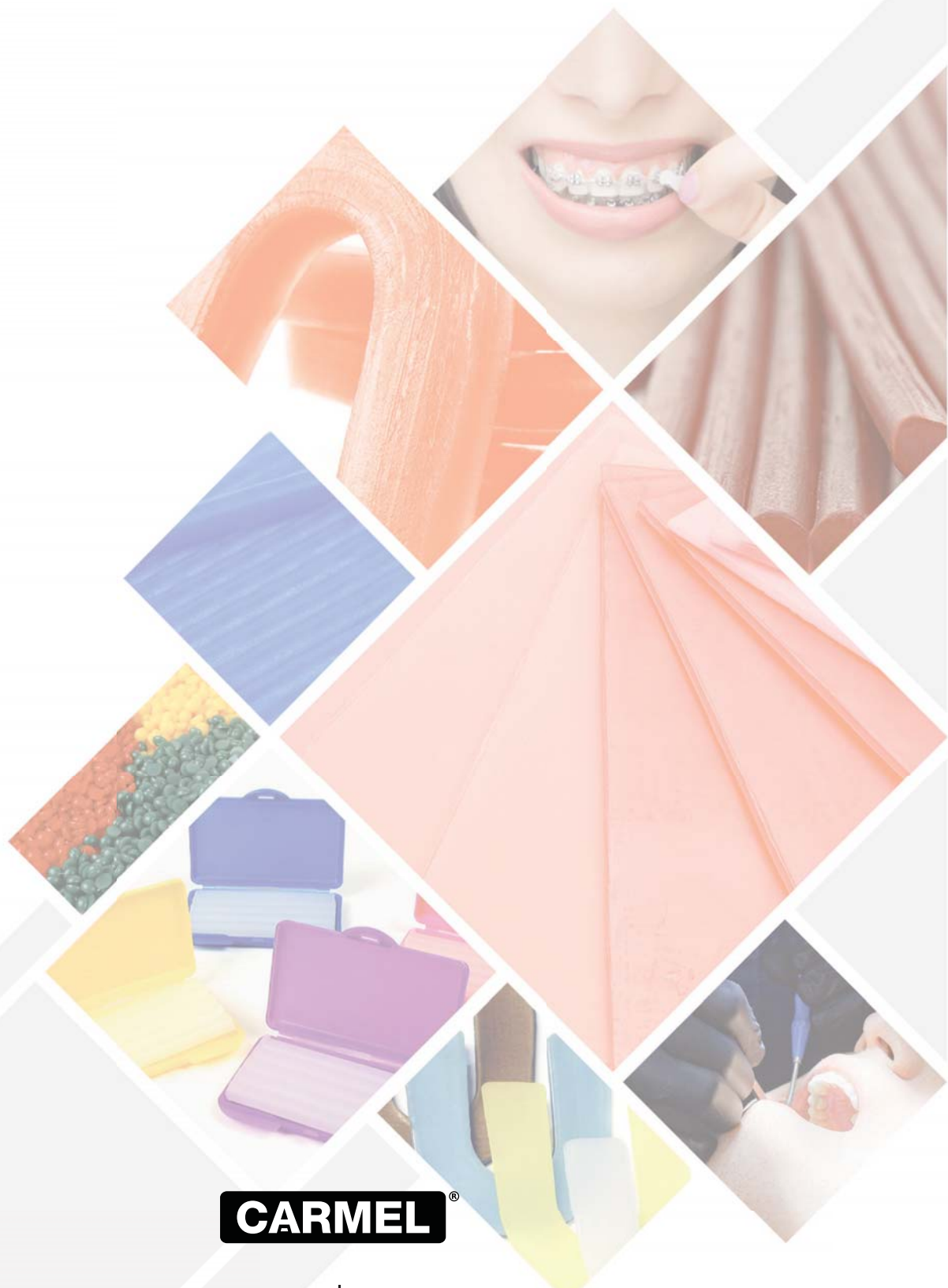

CARMEL®

HEAD OFFICE
SIÈGE SOCIAL | OFICINA CENTRAL
CARMEL INDUSTRIES
10220 Armand-Lavergne Ave.
Montreal, Quebec, Canada H1H 3N5
Tel. 514 270-5377 | Fax. 514 270-2025
info@carmelindustries.com
www.carmelindustries.com

U.S. MAILING ADDRESS
ADRESSE POSTALE AUX É-U
DIRECCIÓN DE CORREO DE EE. UU.
CARMEL INDUSTRIES
P.O. Box 3150
Champlain, New York
USA 12919